


CATALOGUE

Tên sản phẩm: Vật liệu dùng trong cấy ghép nâng mũi
Chủng loại: Osteomesh
Hãng sản xuất: OSTEOPORE INTERNATIONAL PTE. LTD
Xuất xứ: SINGAPORE
Chứng nhận: ISO 13485:2016
EC Design-Examination

Vật liệu dùng trong cấy ghép nâng mũi là một chất làm đầy khoảng trống trong xương. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng trong việc sửa chữa các lỗ hổng trong phẫu thuật thẩm kinh, vết cắt xương sọ và các khuyết tật xương sọ khác. Sản phẩm cũng được sử dụng trong việc nâng cao hoặc phục hồi đường viền xương thuộc khối xương sọ. Điều này bao gồm nâng mũi, cụ thể là nâng cao đường viền xương ở vùng mũi. Sản phẩm cũng được dùng cho mục đích nha khoa; để sử dụng trong việc mài giũa và/ hoặc điều chỉnh khiếm khuyết về xương trong miệng, chẳng hạn như trám vào vị trí nhổ răng. Hình dạng của thiết bị phù hợp với khiếm khuyết, do đó tối đa được sự tiếp xúc trực tiếp với xương người. Thiết bị này được làm từ chất liệu Polycaprolactone (PCL). Chất này sẽ được phân hủy và được cơ thể tái hấp thụ hoàn toàn bằng cách thủy phân, sau đó sẽ được cơ thể chuyển hóa trong thời gian 18-24 tháng. Thiết bị này không chứa chất phóng xạ và an toàn để sử dụng với MRI (chụp cộng hưởng từ).


KÍCH THƯỚC

PC 12

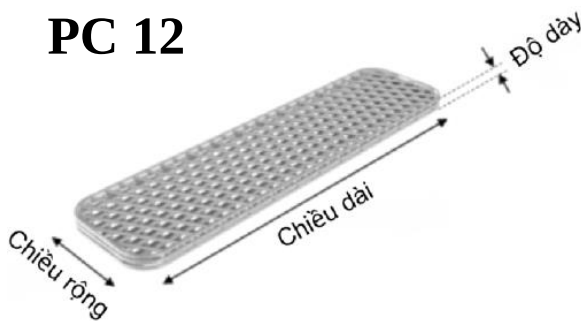

Mã sản phẩm	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Độ dày (mm)
PC12(39, 10, 1)	39	10	1
PC12(39, 10, 1.25)	39	10	1.25
PC12(40,10,0.5)	40	10	0.5
PC12(40,10,0.8)	40	10	0.8

P C 50

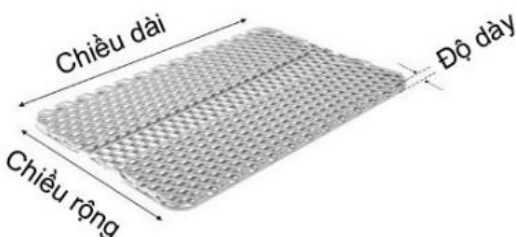

Mã sản phẩm	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Độ dày (mm)
PC50(39, 25, 1)	39	25	1
PC50(39, 25, 1.25)	39	25	1.25
PC50(40,25,0.5)	40	25	0.5
PC50(40,25,0.8)	40	25	0.8



OSTEOPORE INTERNATIONAL PTE. LTD

2 TUKANG INNOVATION GROVE, #09-06, JTC

MEDTECH HUB, SINGAPORE 618305

<https://osteopore.com>

Trang 2 / 2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Chuẩn bị vị trí cấy ghép bằng các kỹ thuật phẫu thuật tiêu chuẩn.
2. Phải kiểm soát được chảy máu tích cực trước khi cấy ghép vật liệu này.
3. Cố định thiết bị tại chỗ theo đánh giá lâm sàng chuyên nghiệp của bác sĩ phẫu thuật và các phương thức phẫu thuật được chấp nhận hiện nay. Tham khảo Hướng dẫn phẫu thuật của Osteomesh để được hướng dẫn chi tiết về việc cấy ghép.
4. Dán nhãn truy xuất nguồn gốc trong bệnh án của bệnh nhân